

EYELA

360° 迴旋式振盪機

獨特小型3種類型振盪機


迴旋、往復、往復+振動

Model : MRM-1000




尚偉股份有限公司
SUNWAY SCIENTIFIC CORPORATION


迴旋

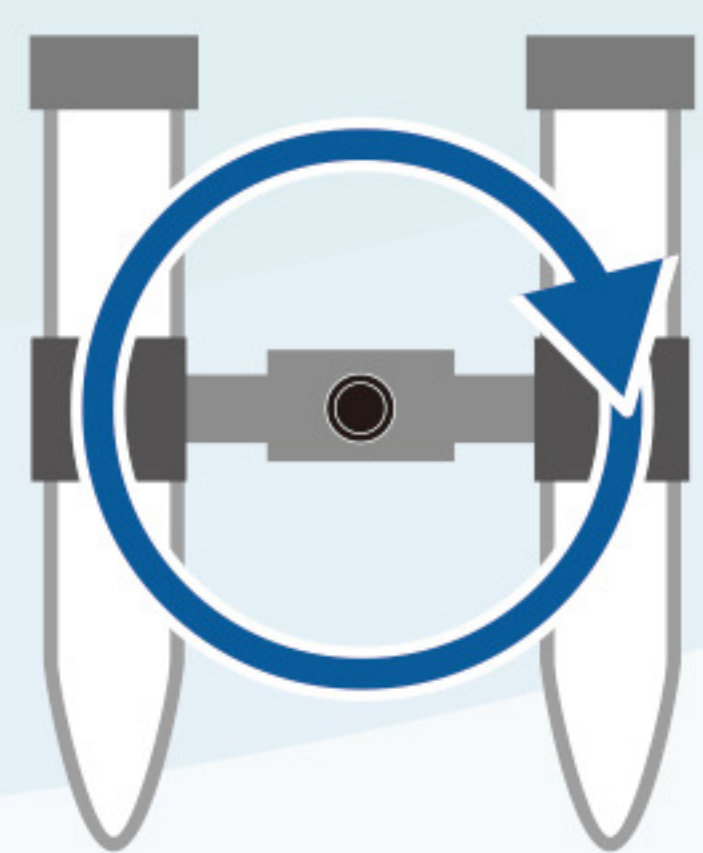

往復

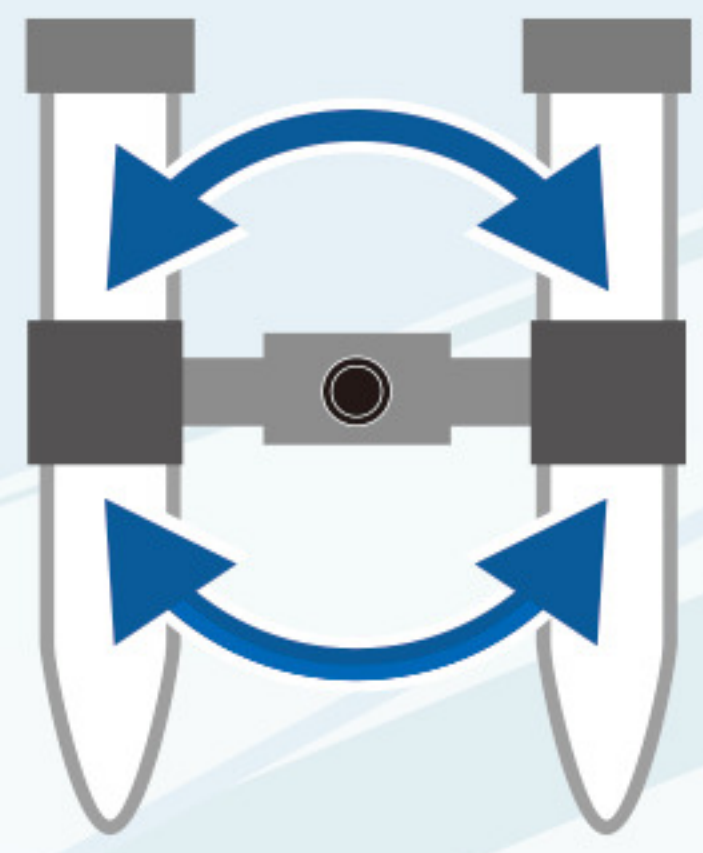

往復+振動

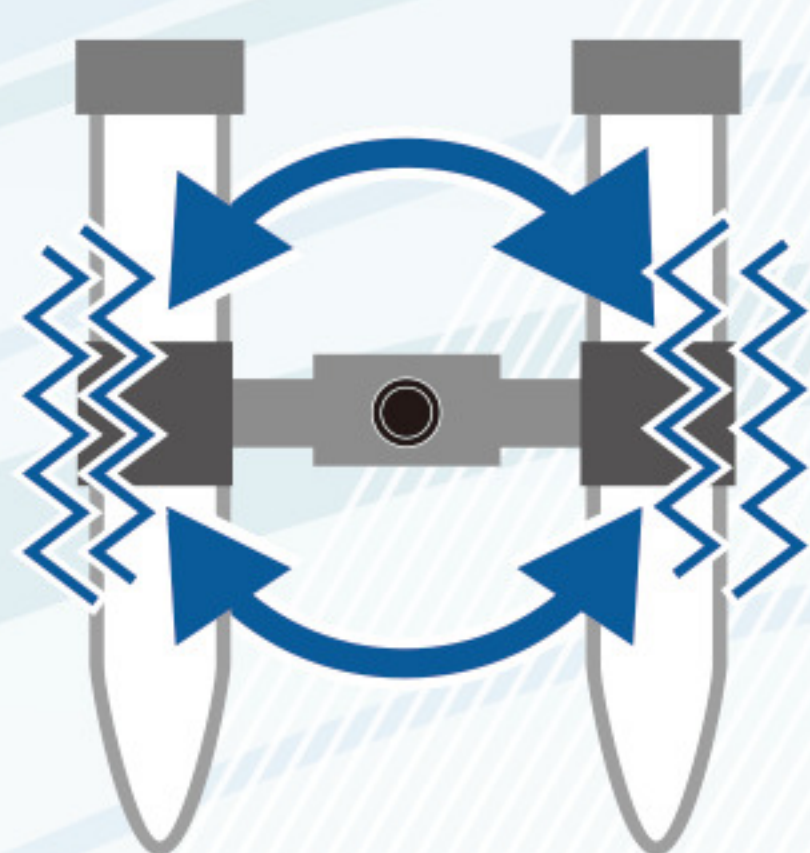

3種振盪方式 (迴旋、往復、往復+振動)

- 迴旋：360° 垂直回旋
- 往復：傾斜角度往復回轉
- 往復+振動：以窄幅度往復運動（強度：3級）。
透過擺動容器，將樣品分散於容器壁上。

這款360° 回旋振盪器能使用不同容器。有4款支架可供選擇，
並可透過快拆更換支架。

Videos describing product features
and characteristics



We provide videos on our website
for further information. Videos
introduce you points that cannot be
expressed in detail in our catalog.



Click here to see the movie
for the actual shaking motions
of vertical rotation, reciprocal
and reciprocal + vibration in
Model MRM-1000.



MRM-1000 主體



支架：MRM-R50 + MRM-R1.5



支架：MRM-R15 x 2



支架：MRM-RP

依據使用的容器，有4種不同支架可供選擇，最多可以搭配2組支架。
可根據容量尺寸及支架數量進行靈活配置。（僅能安裝1個板架）

型號	MRM-1000
振盪方式	迴旋、往復、往復+振動
振盪速度範圍	1~100 rpm
傾斜角度	0~359°（1°調整）
計時器功能	99小時59分59秒
支架種類（選配）	4種
支架負載能力	大約 750 g（包含支架）
環境溫度範圍	4~50°
環境濕度範圍	相對濕度30~80 %
外部尺寸（mm）	333(340) W x160 D x157 H
重量	大約 3.2 kg
電源和電壓	0.2 A, 20 VA/ 100VAC 50/60 Hz

※規格是在室溫20°C、額定電源電壓50Hz以及無負載條件下測量。
※不包含支架及容器，可依據不同應用需求進行選購。
※有115V和220V類型可供選擇。

搭配選項



①



②



③



④

產品名稱	① 1.5/2.0 mL 管架	② 15 mL 離心管架	③ 50 mL 離心管架	④ 平板架
型號	MRM-R1.5	MRM-R15	MRM-R50	MRM-RP
相容容器	1.5 mL管 2.0 mL管	15 mL離心管	50 mL離心管	T-75 燒瓶， 其他平底容器
容器數量	12支	6支	4支	小於180x100 mm
支架數量	最多2個	最多2個	最多2個	1個
重量	大約 130 g	大約 165 g	大約 175 g	大約 470 g



尚偉股份有限公司
SUNWAY SCIENTIFIC CORPORATION

台北：02-2771-8337 新竹：03-535-2179

台中：04-2206-1113 高雄：07-555-2355

www.sun-way.com.tw

用心，為您做好一輩子的服務

LINE ID: @SUN-WAY

